


SenSura[®] Mio

Tilpasser seg kroppen,
uansett kroppsform

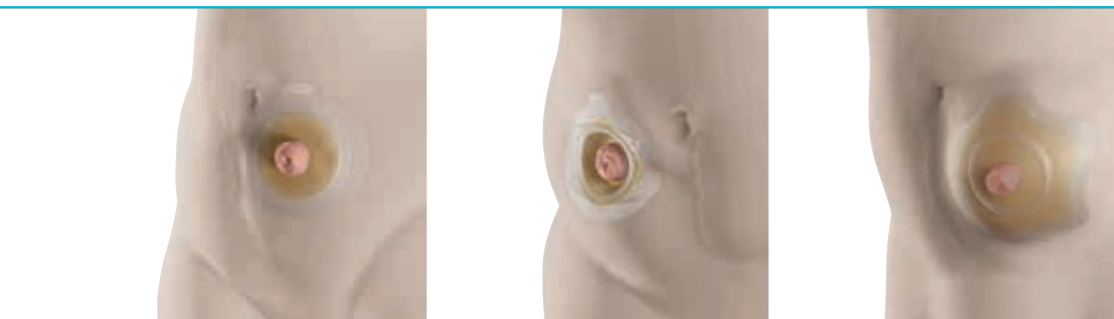

Alle kropper er unike og vårt mål er å tilby stomiprodukter som tilpasser seg alle kropper, uansett kroppsform.

SenSura[®] Mio sortimentet har flere ulike hudplater, slik at du kan finne den som passer din kropp best.

SenSura[®] Mio hudplater er elastiske uten at det går på kompromiss med sikkerheten. Sortimentet får du både som 1- og 2-dels system, med Click- og

Flex kobling. Posene fås som lukket og tømbar pose, samt urostomipose.

SenSura[®] Mio flate plater passer for de som har et relativt flatt område rundt stomien. SenSura[®] Mio Convex passer for kroppsprofiler som går innover og har behov for ekstra støtte. SenSura[®] Mio Convex Flip er spesialutviklet for brokk og kroppsprofiler som går utover.



Coloplast

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no
Følg oss på Facebook

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2018-06
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark
CRM: 440N00334

SenSura[®] Mio Convex Flip - 1-dels lukket

Lukket pose med sirkelfilter



Hullstørrelse	Mini	Midi	Maxi
Nøytral grå med vindu			
Oppklippbar 10-40 mm	181000	181010	181020
Oppklippbar 10-50 mm		181100	181200
Oppklippbar 25-50 mm		181110	181210
Oppklippbar 30-50 mm		181120	181220
Oppklippbar 35-50 mm		181130	181230
Oppklippbar 10-60 mm			181300
Oppklippbar 40-60 mm			181310
Oppklippbar 45-60 mm			181320
Klar			
Oppklippbar 10-60 mm			181350

SenSura[®] Mio Convex Flip - 1-dels tømbar

Tømbar pose med sirkelfilter



Hullstørrelse	Mini	Midi	Maxi
Nøytral grå med vindu			
Oppklippbar 10-40 mm	182000	182010	182020
Oppklippbar 10-50 mm		182100	182200
Oppklippbar 25-50 mm		182120	182210
Oppklippbar 30-50 mm		182130	182220
Oppklippbar 35-50 mm		182140	182230
Oppklippbar 10-60 mm			182300
Oppklippbar 40-60 mm			182310
Nøytral grå uten vindu			
Oppklippbar 10-40 mm			182030
Oppklippbar 10-50 mm			182240
Oppklippbar 10-60 mm			182320
Klar			
Oppklippbar 10-60 mm			182350

SenSura[®] Mio Convex Flip - 1-dels urostomi

Urostomi flerammerposer



Hullstørrelse	Mini	Midi	Maxi
Nøytral grå med vindu			
Oppklippbar 10-40 mm		184000	184010
Oppklippbar 20-40 mm			184020
Oppklippbar 25-40 mm			184030
Oppklippbar 30-40 mm			184040
Klar			
Oppklippbar 10-40 mm			184050

SenSura[®] Mio Convex Flip hudplater

Click hudplate



Hullstørrelse	Ringstørrelse			
	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Med belteører				
Oppklippbar 10-35 mm	185000			
Oppklippbar 20-35 mm	185010			
Oppklippbar 10-45 mm		185100		
Oppklippbar 25-45 mm		185110		
Oppklippbar 30-45 mm		185120		
Oppklippbar 35-45 mm		185130		
Oppklippbar 10-55 mm			185200	
Oppklippbar 30-55 mm			185210	
Oppklippbar 35-55 mm			185220	
Oppklippbar 40-55 mm			185230	
Oppklippbar 45-55 mm			185240	
Oppklippbar 10-65 mm				185300
Oppklippbar 45-65 mm				185310
Oppklippbar 50-65 mm				185320



SenSura[®] Mio Convex Flip

SenSura® Mio Convex Flip

Spesialdesignet for brokk og fyldige områder

En flat plate vil ikke sitte tett og jevnt over en kurvet eller rund kroppsfasong. Den vil kunne folde eller rynke seg, og føre til lekkasjeproblematikk. Derfor har Coloplast utviklet en hudplate for å møte utfordringene til de med brokk og fyldige områder rundt stomien. Kent var en av de første som prøvde SenSura® Mio Convex Flip i Norge. Han har brokk og hadde utfordringer med å tilpasse en flat hudplate.




“SenSura Mio Convex Flip fester seg godt rundt brokket. Nå føler jeg meg trygg på at stomiutstyret sitter godt på hele tiden”

- Kent 63 år

SenSura® Mio Convex Flip

Kurvet for å passe fyldige områder

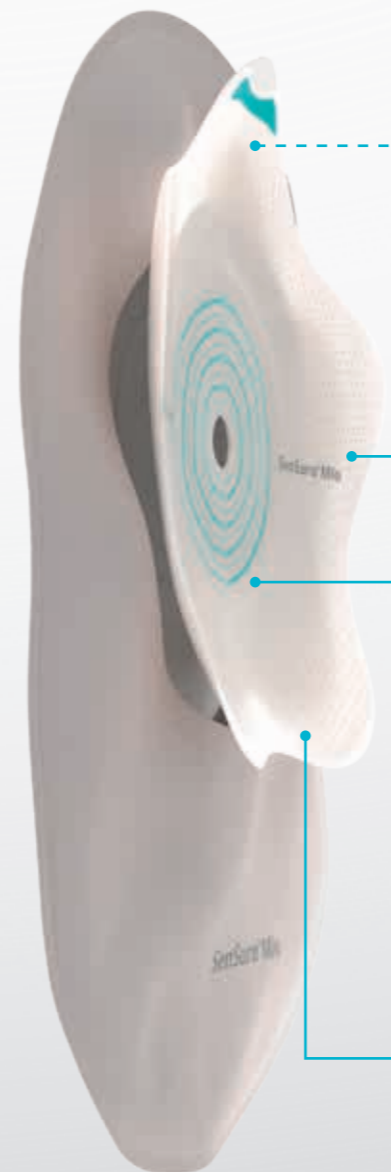

Færre folder og kanaler

Hudplaten er stjerneformet for å oppnå tettere kontakt med huden. Dette hindrer folder og kanaler der lekkasjer kan oppstå.



Unikt prefilter


Et filter som varer lenger og som reduserer oppblåst pose med opptil 61% for de med ileostomi og 52% for de med colostomi.*

*Coloplast klinisk studie 2010




Kurvet form

En kurvet hudplate bidrar til bedre kroppstilpasning og gjør påføringen enklere.

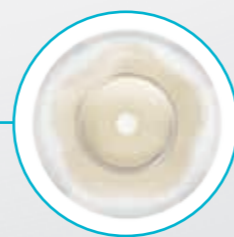

Støtte til stomien

En innebygget stabilitetsring gir støtte til stomien og stabiliserer hudplatenes indre kjerne.

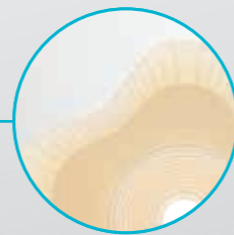


Sitter trygt

Festesoner ytterst og i kjernen av kleberens øker elastisiteten. Hudplaten sitter godt og følger kroppens bevegelser.

Sett på, fest og flip

SenSura® Mio Convex Flip er kurvet for å gjøre påføringen enklere. Når hudplaten er godt festet inntil stomien, brettes kleberarmene inn mot huden og strykes godt på for et sikkert feste.

Stjerneformen sørger for at det ikke oppstår folder og kanaler, eller at hudplaten rynker seg. Dermed øker kontaktflaten til huden og risikoen for lekkasje reduseres.

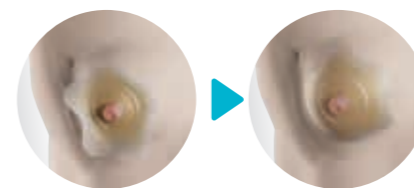

SenSura® Mio Convex Flip er basert på BodyFit Technology®. Det er innovativ teknologi med utgangspunkt i menneskers behov og kroppstilpasning.

Coloplast Assistanse

Coloplast Assistanse er et tilbud for deg med stomi. Vi har erfarne sykepleiere du kan kontakte for spørsmål og produktveiledning. På våre nettsider og i bladet Assistanse, kan du lese faglige artikler skrevet av helsepersonell og finne interessante brukerhistorier. Bladet Assistanse er gratis og helt uforpliktende.

Kontakt oss, vi er her for deg!



22 57 50 00

www.coloplast.no

assistanse@coloplast.com

Den beste løsningen for din kropp

Alle kropper er forskjellige og trenger individuelle løsninger. Riktig tilpassede produkter er viktig for å unngå lekkasje og å holde huden frisk. På vår nettside kan du finne tre selvtester. Disse kan være til hjelp for å velge rett produkt for dine behov.

www.coloplast.no/selvtteststomi

