

SenSura og SenSura Xpro – unike tolagsklebere

SenSura kleberne består av to lag som gjør det mulig å løse de fem klassiske kleberdilemmaene: God klebeevne, stor fleksibilitet, absorberende, oppløsningsresistent og lett å ta av. Det er umulig å kombinere disse fem egenskapene i ett enkelt kleberlag.

Beskytter huden

- Beskytter huden mot stomiinnhold fra stomien
- Kleberer sveller og tetter eventuelle sprekker mellom hudplaten og stomien


Flex Soner

- For bedre komfort
- Gir ekstra fleksibilitet og gjør at kleberer følger kroppens bevegelser



Ekstra hudvennlig lag

- Sikrer at kleberer fester godt til huden
- Absorberer fuktighet
- Enkel å ta av og etterlater ikke kleberrester på huden

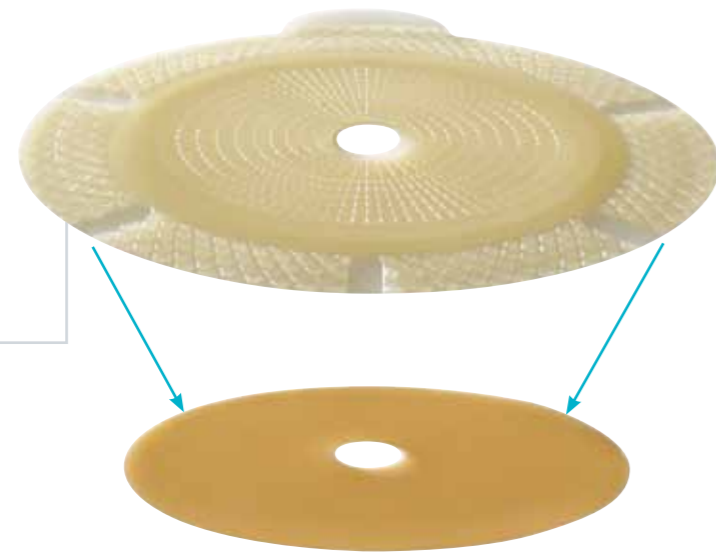

SenSura – en ny standard innen stomiomsorg

Historien om Coloplast startet i 1954

Elise Sørensen er sykepleier. Hennes søster Thora har nettopp tatt stomioperasjon og er redd for å gå ut blant folk, fordi hun frykter lekkasje fra stomien. Berørt av sin søsters vanskelige situasjon lager Elise verdens første selvklebende stomipose. En pose som ikke lekker gir Thora og tusener av andre mennesker i samme situasjon en mulighet til å leve et normalt liv.

En enkel løsning av stor betydning

I dag inkluderer vår virksomhet områdene stomi, urologi og kontinens samt hud og sårpleie. Måten vi driver selskapet på vil alltid være påvirket av Elise; vi lærer og vi responderer med produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med intime helsebehov

Stomi
Urologi og kontinens
Hud- og sårpleie

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark



Coloplast Norge AS
Postboks 6287 Etterstad
0603 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no

Malmerveid Trykkesat 2011 709 - Erik Tandem Nielsen AS

SenSura®



SenSura® Xpro kleberer - for ekstra beskyttelse




Stomier med aggressivt stomiinnhold

Risikoen for hudproblemer hos personer med ileostomi eller urostomi

Personer som lever med ileostomi eller urostomi har høyere risiko for å utvikle hudproblemer. Resultatene fra OstomySkinStudy viste at hudproblemer oppsto oftest hos personer med ileostomi (57%) og urostomi (48%).¹

Videre er hudproblemene mest alvorlige hos personer med disse stomitypene. Stomiinnhold fra ileo- og urostomier er mer flytende og ofte mer aggressiv. Det gjør at hudplaten brytes ned raskere, og utsetter stomien for stomiinnhold.

Kontakt med stomiinnhold er den vanligste grunnen til hudirritasjon som igjen fører til hudproblemer og ubehag.

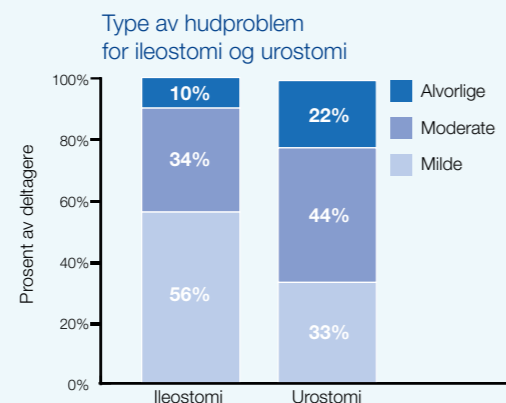

¹: Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, Nybæk H, Karlsmark T, Laursen TN, Jemec G, "OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas", British Journal of Nursing, 2006, Vol 15, No 16, pp 854-862.
²: Black, P. "Treating peristomal skin problems in the community," Br J Community Nurs, 2002;7:212-7.

For å beskytte huden mot aggressivt stomiinnhold, har vi utvidet SenSura sortimentet og lanserer nå SenSura Xpro kleberen. Denne hudkleberen gir en ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold.



Sensura standard
Egner seg for de fleste personer med stomi.



Sensura Xpro
Til personer som har behov for ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold.

SenSura Xpro kleberen for ekstra beskyttelse

SenSura Xpro kleberen har det samme doble kleberlaget som standard SenSura. I tillegg er det tilsatt to ekstra ingredienser i SenSura Xpro kleberen som gjør at kleberen beskytter bedre mot aggressivt stomiinnhold fra en ileostomi eller urostomi.



SenSura Xpro kleberen er mer oppløsningsresistent enn standard SenSura, noe som gjør at kleberen holder seg like hel selv om den utsettes for aggressivt stomiinnhold.

- Beskytter huden mot aggressivt stomiinnhold
- Reduserer hudproblemer som kløe, rødhet og sår hud
- Mer komfortabelt for brukeren ved at risikoen for hudproblemer reduseres

SenSura Xpro kleberen fester også godt til huden, noe som forhindrer at aggressivt stomiinnhold lekker inn under platen.

- Forebygger hudirritasjon
- Kleberen absorberer fuktighet og sveller rundt stomien, slik at lekkasjer ikke oppstår

Peristomal hudstatus er viktig for hvordan en person takler det å leve med stomi. Det kan også ha innvirkning på livskvaliteten.²

SenSura – et omfattende sortiment

SenSura Xpro kleberen er tilgjengelig som flat og convex light versjon i både SenSura Flex og SenSura Click sortimentet.



SenSura Flex 2-dels system

FLAT HUDPLATE	
SenSura Xpro 35mm 10-33	101040
SenSura Xpro 50mm 10-48	101050
SenSura Xpro 70mm 10-68	101060



CONVEX LIGHT HUDPLATE	
SenSura Xpro Convex Light 35mm 15-23mm	113040
SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-33mm	103050
SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-43mm	113060
SenSura Xpro Convex Light 70mm 15-53mm	103070

SenSura Click 2-dels system

FLAT HUDPLATE	
SenSura Xpro 40mm 10-33 mm	100150
SenSura Xpro 40mm 20 mm	100160
SenSura Xpro 40mm 25 mm	100170
SenSura Xpro 50mm 10-45 mm	100250
SenSura Xpro 50mm 30 mm	100260
SenSura Xpro 50mm 35 mm	100270
SenSura Xpro 60mm 10-55 mm	100350
SenSura Xpro 60mm 40 mm	100360
SenSura Xpro 70mm 10-65 mm	100450

CONVEX LIGHT HUDPLATE	
SenSura Xpro Convex Light 40mm 15-23mm	110150
SenSura Xpro Convex Light 40mm 21mm	110160
SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-33mm	110250
SenSura Xpro Convex Light 50mm 25mm	110260
SenSura Xpro Convex Light 50mm 28mm	110270
SenSura Xpro Convex Light 50mm 31mm	110280
SenSura Xpro Convex Light 60mm 15-43mm	110350
SenSura Xpro Convex Light 60mm 35mm	110360
SenSura Xpro Convex Light 70mm 15-53mm	110450

SenSura Xpro kleberen passer både til SenSura Click og SenSura Flex tømbare poser og urostomiposer.